

Europroxima DEMO ELISA

トレーニングおよび検証のためのサンドイッチ ELISA キット



自動 ELISA 装置の精度検証に




スタッフや学生の教育・訓練に



高価な ELISA キットを使う前の練習に

特徴

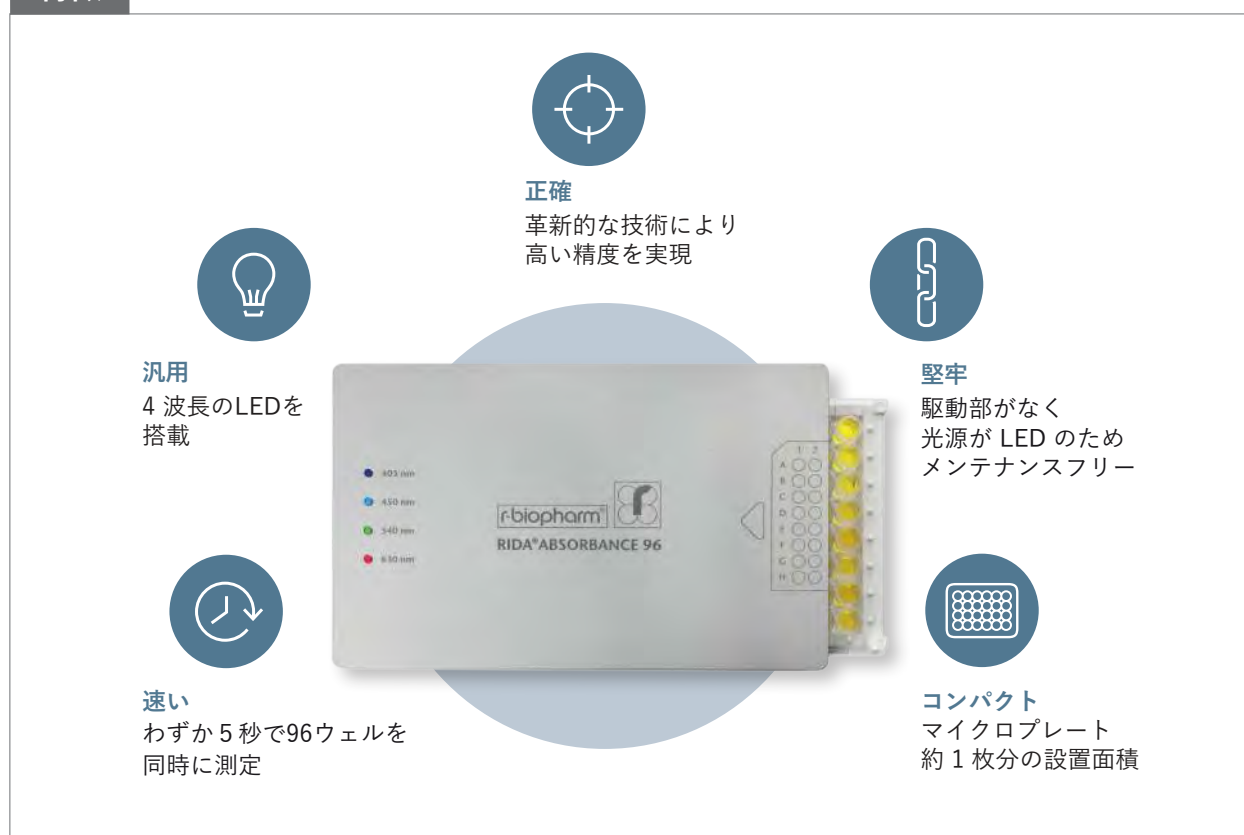

汎用
4 波長のLEDを
搭載

正確
革新的な技術により
高い精度を実現

堅牢
駆動部がなく
光源が LED のため
メンテナンスフリー

コンパクト
マイクロプレート
約 1 枚分の設置面積

速い
わずか 5 秒で96ウェルを
同時に測定

RIDA® ABSORBANCE 96 (製品コード: ZRA96FF)

価格: ¥980,000

本体	
寸法	5.5 x 9.6 x 15.4 cm
重さ	0.9 kg
光学系	
光源	LED
波長	405, 450, 540, 630 nm
測定レンジ	0 - 3.5 OD
分解能	0.001 OD
データ出力	USB 2.0 で PC と接続
正確性	405 nm : ≤ 1.5 % + 0.010 OD (0.000 - 2.000 OD) ≤ 3.0 % + 0.010 OD (2.000 - 3.000 OD) 450 nm, 540 nm, 630 nm: ≤ 1.0 % + 0.010 OD (0.000 - 2.000 OD) ≤ 1.5 % + 0.010 OD (2.000 - 3.000 OD)
再現性	≤ 0.5 % + 0.005 (0.000 - 2.000 OD) ≤ 1.0 % + 0.010 (2.000 - 3.000 OD)
測定時間	< 5 秒

電源	
電源	5 VDC, 最大 3 A, USB 2.0 で PC に接続
消費電力	2.5 W
製品および付属品	

1 x RIDA® ABSORBANCE 96
1 x RIDASOFT® WIN.NET
1 x USB 2.0 ケーブル
1 x 6 角レンチ
1 x クリーニング布

ソフトウェア RIDASOFT® WIN.NET

RIDA® ABSORBANCE96 の設定、データ出力、解析は、付属のソフトウェア RIDASOFT® Win.NET を用いて実行します。
R-Biopharm 社の ELISAキットの定量プロトコールはソフトウェアに予め登録されており、プレートを測定すると同時に定量値が得られます。もちろん、他社のキットも定量プロトコールを登録して測定できます。

本冊子に記載されている価格は2026年4月現在の税別価格です

製造元: R-Biopharm AG

<http://www.r-biopharm.de>

輸入販売元: アズマックス株式会社

東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館5F

Phone:: 03-6661-1090 FAX: 03-6661-1091

<http://www.azmax.co.jp> sales@azmax.co.jp